


LaboPlast® | SteriPlast® DispoSampler



- ▶ Para el uso desechable
- ▶ Embalado individualmente
- ▶ Producción, montaje y embalaje en sala blanca de clase 7 (10.000)
- ▶ Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
- ▶ Esterilización gamma opcional
- ▶ HDPE

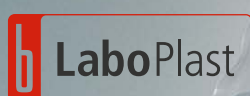

DispoSampler – Tomamuestras desechable | Para tomas de muestras de máxima exigencias

Los tomamuestras desechables DispoSampler de Bürkle permiten coger muestras de líquidos, sustancias viscosas, polvos y granulados. Se pueden coger muestras de un punto específico, de todas las capas o seccionales, tanto en cantidades pequeñas como grandes.

A diferencia de los tomamuestras reutilizables convencionales, los tomamuestras desechables no deben limpiarse después de utilizarlos.

- ▶ La limpieza de los tomamuestras reutilizables suele ser una tarea exigente y a menudo complicada, e incluso imposible si las sustancias son muy grasientas, pegajosas o tóxicas
- ▶ No es necesario interrumpir los procesos de trabajo para limpiar
- ▶ Se elimina cualquier riesgo de contaminación cruzada
- ▶ No es necesario validar el método de limpieza en las auditorías
- ▶ Ahorro de tiempo y dinero

DispoSampler LaboPlast® y SteriPlast® de Bürkle



MultiDispo

Colector zonal desechable para coger muestras de varias capas del material. Adecuado para polvos fluidos y granulados pequeños. La prueba de todas las capas se puede vaciar directamente en un recipiente a través de la empuñadura abierta.

- ▶ Vaciado sencillo por la abertura de la empuñadura (Ø 14 mm)
- ▶ Ø 25 mm / Ø punta 30 mm

Longitud mm	Volumen ml	Modelo	Unidades por pack	Nº de artículo
500	100	estándar	20	5393-4440 N4
500	100	esterilizado	20	5393-4441 N4
1000	200	estándar	20	5393-4450 N4
1000	200	esterilizado	20	5393-4451 N4



ZoneDispo

El colector multicapa desechable ZoneDispo permite coger una muestra representativa de tres capas diferentes en una única operación. Adecuado para polvos fluidos y granulados pequeños. La muestra acumulada se puede guardar y transportar en el tomamuestras cerrado.

- ▶ Ø 25 mm / Ø punta 30 mm

Longitud mm	Volumen ml	Modelo	Unidades por pack	Nº de artículo
500	100	estándar	20	5393-4420 N4
500	100	esterilizado	20	5393-4421 N4
1000	200	estándar	20	5393-4430 N4
1000	200	esterilizado	20	5393-4431 N4



TargetDispo

El TargetDispo permite coger una muestra en un punto específico del material determinado por adelantado. El colector penetra cerrado en el polvo o en el granulado, y solo cuando se ha llegado al punto de extracción, se abre y se vuelve a cerrar. De esta manera, se toma una muestra exactamente del punto deseado. La muestra se puede vaciar fácilmente por la empuñadura abierta.

- ▶ Vaciado sencillo por la abertura de la empuñadura (Ø 14 mm)
- ▶ Ø 25 mm / Ø punta 30 mm

Longitud mm	Volumen ml	Modelo	Unidades por pack	Nº de artículo
500	100	estándar	20	5393-4460 N4
500	100	esterilizado	20	5393-4461 N4
1000	200	estándar	20	5393-4470 N4
1000	200	esterilizado	20	5393-4471 N4



MicroDispo

MicroDispo permite coger cantidades de muestras especialmente pequeñas (10 ml). En algunos casos, únicamente se debe o se puede coger una pequeña cantidad para analizarla, especialmente en el segmento farmacéutico. El tomamuestras desechable permite tomar muestras precisas de un punto específico en polvos fluidos o granulados pequeños.

- ▶ Empuñadura ergonómica
- ▶ Ø 21 mm

Longitud mm	Volumen ml	Modelo	Unidades por pack	Nº de artículo
500	10	estándar	20	5393-2240 N4
500	10	esterilizado	20	5393-2241 N4
1000	10	estándar	20	5393-2250 N4
1000	10	esterilizado	20	5393-2251 N4




PowderDispo

PowderDispo es el tomamuestras desechable ideal para la toma de muestras seccionales de sustancias en polvo o ligeramente cohesivas. La lanza permite tomar una muestra completa de todas las capas en sacos o recipientes más pequeños.

- ▶ Ø 21 mm

Longitud mm	Volumen ml	Modelo	Unidades por pack	Nº de artículo
300	60	estándar	20	5393-5510 N4
300	60	esterilizado	20	5393-5511 N4
500	100	estándar	20	5393-5522 N4
500	100	esterilizado	20	5393-5521 N4

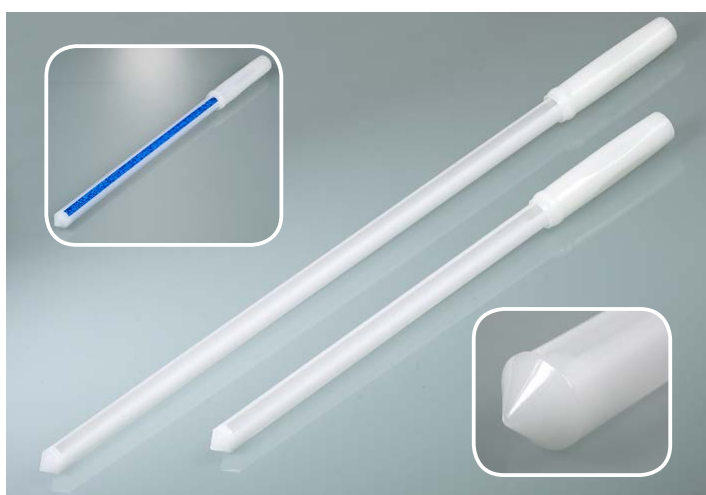

DispoPicker

Tomamuestras desechable para polvo y material granulado fino. La punta cerrada impide que el material recogido vuelva a salir de la lanza de muestras. DispoPicker es ideal para la toma de muestras seccionales.

- ▶ Ø 21 mm

Longitud mm	Volumen ml	Modelo	Unidades por pack	Nº de artículo
300	60	estándar	20	5393-5540 N4
300	60	esterilizado	20	5393-5541 N4
500	100	estándar	20	5393-5550 N4
500	100	esterilizado	20	5393-5551 N4



DispoLance

El tomamuestras desechable DispoLance permite coger de forma rápida y sencilla cantidades tanto grandes como pequeñas de muestras directamente de los sacos. El colector puede utilizarse con polvo fluido y granulados pequeños. La resistente punta del tomamuestras DispoLance penetra en el recipiente, y la muestra fluye por el tubo interior abierto hasta la bolsa o el recipiente que hay justo debajo.

- ▶ Cantidad de muestras variable
- ▶ Diámetro nominal 14 mm
- ▶ Ø 21 mm

Longitud mm	Modelo	Unidades por pack	Nº de artículo
300	estándar	20	5393-5560 N4
300	esterilizado	20	5393-5561 N4
500	estándar	20	5393-5570 N4
500	esterilizado	20	5393-5571 N4



ViscoDispo

El tomamuestras desechable ViscoDispo permite coger muestras de sustancias muy viscosas, de hasta 100 000 mPas. La empuñadura ergonómica y la robusta barra de tiro facilitan la succión de sustancias semilíquidas.

- ▶ Empuñadura ergonómica
- ▶ Sin juntas
- ▶ Ø 21 mm
- ▶ Diámetro de abertura 10 mm

Longitud mm	Volumen ml	Modelo	Unidades por pack	Nº de artículo
500	100	estándar	20	5393-3320 N4
500	100	esterilizado	20	5393-3321 N4
1000	200	estándar	20	5393-3330 N4
1000	200	esterilizado	20	5393-3331 N4





LiquiDispo

Los tomamuestras desechables LiquiDispo permiten coger muestras de líquidos en estado desde muy líquido hasta ligeramente viscoso. Una empuñadura ergonómica facilita la extracción de la muestra, permitiendo succionar hasta 200 ml igual que con una jeringuilla.

- ▶ Empuñadura ergonómica
- ▶ Sin juntas
- ▶ Ø 21 mm
- ▶ Diámetro de abertura 2,5 mm

Longitud mm	Volumen ml	Modelo	Unidades por pack	Nº de artículo
500	100	estándar	20	5393-1120 N4
500	100	esterilizado	20	5393-1121 N4
1000	200	estándar	20	5393-1130 N4
1000	200	esterilizado	20	5393-1131 N4



DispoPipette

Tomamuestras desechable sencillo para extraer sustancias muy fluidas. Cuando la DispoPipette se introduce abierta en el líquido, se coge una muestra de todas las capas; por lo contrario, si se lleva cerrada hasta el punto de extracción y se abre una vez allí, se coge una muestra de ese punto específico. Muy fácil de utilizar. Con dos tamaños de apertura (2,5 / 5,5 mm) para distintas viscosidades.

- ▶ Toma de muestras de punto específico y de todas las capas
- ▶ Ø 21 mm

Longitud mm	Volumen ml	Modelo	Unidades por pack	Nº de artículo
500	100	estándar	20	5393-5500 N4
500	100	esterilizado	20	5393-5501 N4
1000	200	estándar	20	5393-5531 N4
1000	200	esterilizado	20	5393-5532 N4



DispoTube

La empuñadura ergonómica del DispoTube facilita el trabajo y posibilita un buen agarre incluso bajo condiciones adversas, como por ejemplo al llevar guantes. Colector de muestras desechable para coger muestras de líquidos.

- ▶ Empuñadura ergonómica
- ▶ Toma de muestras de punto específico y de todas las capas
- ▶ Ø 21 mm
- ▶ Diámetro de abertura 5,5 mm

Longitud mm	Volumen ml	Modelo	Unidades por pack	Nº de artículo
500	100	estándar	20	5393-6620 N4
500	100	esterilizado	20	5393-6621 N4
1000	200	estándar	20	5393-6630 N4
1000	200	esterilizado	20	5393-6631 N4



DispoLadle

DispoLadle es un muestreador cucharón especialmente para el uso único. El vaso con escala y marca en relieve permite una medición e indicación de volumen en pasos de 10 ml, hasta 200 ml. La empuñadura ergonómica y la maniobrabilidad con mano derecha e izquierda con salidas en ambos lados facilitan y simplifican su uso.

- ▶ Vaso de 200 ml
- ▶ Ø exterior 92 mm
- ▶ Empuñadura ergonómica

Longitud mm	Modelo	Unidades por pack	Nº de artículo
500	estándar	20	5393-6640 N4
500	esterilizada	20	5393-6641 N4
1000	estándar	20	5393-6650 N4
1000	esterilizada	20	5393-6651 N4