


„ЛабоПласт“ (LaboPlast®) | „СтериПласт“ (SteriPlast®) „ДиспоСамплер“ (DispoSampler)



- ▶ Для одноразового использования
- ▶ Раздельная упаковка
- ▶ Производство, сборка и упаковка в чистой комнате класса 7 (10.000)
- ▶ Допуски по пищевым стандартам ЕС и FDA
- ▶ Со стерилизацией гамма-излучением в качестве опции
- ▶ ПЭВП



 LaboPlast

 SteriPlast

„ДиспоСамплер“ (DispoSampler) | это одноразовый пробоотборник, позволяющий удовлетворить высочайшие требования при отборе проб
Одноразовые пробоотборники „ДиспоСамплер“ (DispoSampler) производства компании Bürkle служат для взятия проб из жидкостей, вязких субстанций, порошков и гранулятов. С помощью этого инструмента можно осуществлять точечный, многоуровневый и сквозной отбор проб, а также отбор малых и больших проб. В отличие от традиционных многоразовых пробоотборников, одноразовый пробоотборник не требует очистки после использования.

- ▶ Чистка многоразовых пробоотборников представляет собой весьма трудоёмкую, а порой и сложную процедуру. Более того, в случае с жирными, высокоадгезивными или ядовитыми субстанциями она отчасти вообще невозможна
- ▶ Нет необходимости прерывать рабочие процессы из-за обязательной чистки
- ▶ Полностью исключается загрязнение образца посторонними материалами
- ▶ Отсутствует необходимость в валидации методики чистки при аудитах
- ▶ Экономия времени и средств

„ДиспоСамплер ЛабоПласт“ (DispoSampler LaboPlast®) и „СтериПласт“ (SteriPlast®)



„МультиДиспо“ (MultiDispo)

Одноразовый зональный пробоотборник для отбора проб из нескольких слоёв исследуемого материала. Подходит для свободно текучих порошков и мелкозернистых гранулятов. Опорожнение репрезентативной многоуровневой пробы может быть осуществлено в контейнер для образцов через открытую ручку.

- ▶ Простое опорожнение через отверстие в ручке (Ø 14 мм)
- ▶ Ø 25 мм / Ø наконечник 30 мм

Длина мм	Емкость мл	Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.
500	100	стандарт	20	5393-4440 N4
500	100	стерильный	20	5393-4441 N4
1000	200	стандарт	20	5393-4450 N4
1000	200	стерильный	20	5393-4451 N4



„ЦонДиспо“ (ZoneDispo)

Одноразовый многоуровневый пробоотборник „ЦонДиспо“ (ZoneDispo) позволяет сформировать репрезентативную многоуровневую пробу из различных слоёв за один отбор. Подходит для свободно текучих порошков и мелкозернистых гранулятов. Полученная проба может сохраняться и транспортироваться в закрытом пробоотборнике.

- ▶ Ø 25 мм / Ø наконечник 30 мм

Длина мм	Емкость мл	Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.
500	100	стандарт	20	5393-4420 N4
500	100	стерильный	20	5393-4421 N4
1000	200	стандарт	20	5393-4430 N4
1000	200	стерильный	20	5393-4431 N4



„ТаргетДиспо“ (TargetDispo)

„ТаргетДиспо“ (TargetDispo) позволяет производить точечный пробоотбор на заранее точно определённом участке исследуемого материала. Приёмник вводится в закрытом состоянии в порошок или гранулят, открывается на месте отбора пробы и потом снова закрывается. Таким образом осуществляется высокоточный точечный пробоотбор. Выгрузка пробы может быть легко осуществлена через открытую ручку.

- ▶ Простое опорожнение через отверстие в ручке (Ø 14 мм)
- ▶ Ø 25 мм / Ø наконечник 30 мм

Длина мм	Емкость мл	Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.
500	100	стандарт	20	5393-4460 N4
500	100	стерильный	20	5393-4461 N4
1000	200	стандарт	20	5393-4470 N4
1000	200	стерильный	20	5393-4471 N4



„МикроДиспо“ (MicroDispo)

„МикроДиспо“ (MicroDispo) предлагает возможность отбора особенно малых проб (10 мл). Прежде всего, в фармакологической сфере нередки случаи, когда для анализа можно или требуется получить пробу лишь малого объёма. С помощью этого одноразового пробоотборника возможен безупречный точечный пробоотбор из свободно текучих порошков и мелкозернистых материалов.

- ▶ Эргономичная ручка
- ▶ Ø 21 мм

Длина мм	Емкость мл	Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.
500	10	стандарт	20	5393-2240 N4
500	10	стерильный	20	5393-2241 N4
1000	10	стандарт	20	5393-2250 N4
1000	10	стерильный	20	5393-2251 N4




„ПаудерДиспо“ (PowderDispo)

Одноразовый пробоотборник „ПаудерДиспо“ (PowderDispo) специально предназначен для отбора проб из разных слоёв порошковых или слегка липких субстанций. Благодаря наличию трубки обеспечивается возможность взятия полной многоуровневой пробы из мешков или небольших ёмкостей.

- ▶ Ø 21 мм

Длина мм	Емкость мл	Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.
300	60	стандарт	20	5393-5510 N4
300	60	стерильный	20	5393-5511 N4
500	100	стандарт	20	5393-5522 N4
500	100	стерильный	20	5393-5521 N4

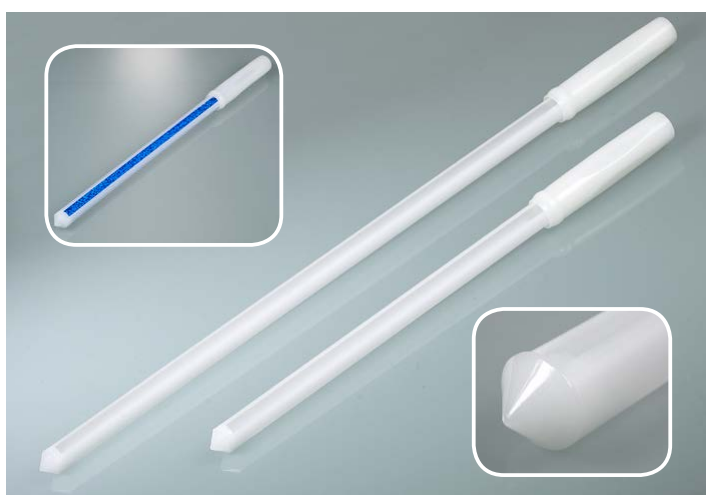

„ДиспоПикер“ (DispoPicker)

Одноразовый пробоотборник для порошковых и мелкозернистых материалов. Благодаря закрываемой головке забранная проба не высыпается обратно из трубки пробоотборника. „ДиспоПикер“ (DispoPicker) представляет собой идеальное решение для отбора сквозных проб.

- ▶ Ø 21 мм

Длина мм	Емкость мл	Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.
300	60	стандарт	20	5393-5540 N4
300	60	стерильный	20	5393-5541 N4
500	100	стандарт	20	5393-5550 N4
500	100	стерильный	20	5393-5551 N4



„ДиспоЛанс“ (DispoLance)

Одноразовый пробоотборник „ДиспоЛанс“ (DispoLance) позволяет осуществлять быстрый и удобный отбор проб малых и больших объёмов непосредственно из мешков. Приёмник подходит для работы со свободно текучими порошками и мелкозернистыми гранулятами. Жёсткий кончик пробоотборника „ДиспоЛанс“ (DispoLance) втыкается в упаковку, проба перемещается по открытой внутренней трубке непосредственно в располагаемый ниже контейнер или пакет.

- ▶ Различный объём проб
- ▶ Номинальный диаметр 14 мм
- ▶ Ø 21 мм

Длина мм	Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.
300	стандарт	20	5393-5560 N4
300	стерильный	20	5393-5561 N4
500	стандарт	20	5393-5570 N4
500	стерильный	20	5393-5571 N4



„ВискоДиспо“ (ViscoDispo)

С помощью одноразового пробоотборника „ВискоДиспо“ (ViscoDispo) возможен забор проб из высоковязких субстанций со значением вязкости до 100.000 мПас. Ручка эргономичной формы и очень стабильная тяга облегчают засасывание даже вязких субстанций.

- ▶ Эргономичная ручка
- ▶ Без сальников
- ▶ Ø 21 мм
- ▶ Диаметр отверстия 10 мм

Длина мм	Емкость мл	Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.
500	100	стандарт	20	5393-3320 N4
500	100	стерильный	20	5393-3321 N4
1000	200	стандарт	20	5393-3330 N4
1000	200	стерильный	20	5393-3331 N4





„Ликвидиспо“ (LiquiDispo)

С помощью одноразового пробоотборника „Ликвидиспо“ (Liqui-Dispo) возможен отбор проб в диапазоне от жидкостей до слабвязких жидких субстанций. Эргономичная ручка облегчает взятие пробы, поскольку возможно всасывание объема до 200 мл так же, как шприцем.

- ▶ Эргономичная ручка
- ▶ Без сальников
- ▶ Ø 21 мм
- ▶ Диаметр отверстия 2,5 мм

Длина мм	Емкость мл	Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.
500	100	стандарт	20	5393-1120 N4
500	100	стерильный	20	5393-1121 N4
1000	200	стандарт	20	5393-1130 N4
1000	200	стерильный	20	5393-1131 N4



„ДиспоПипетт“ (DispoPipette)

Простой одноразовый пробоотборник для отбора жидкотекучих субстанций. Если „ДиспоПипетт“ (DispoPipette) вводится в жидкость в открытом состоянии, тогда осуществляется многоуровневая проба. Если же осуществляется ввод в закрытом состоянии, а уже после ввода производится открытие, тогда производится точечный пробоотбор. Очень простое обращение. Два размера отверстия (2,5 / 5,5 мм) для различных степеней вязкости.

- ▶ Возможен многоуровневый и точечный пробоотбор
- ▶ Ø 21 мм

Длина мм	Емкость мл	Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.
500	100	стандарт	20	5393-5500 N4
500	100	стерильный	20	5393-5501 N4
1000	200	стандарт	20	5393-5531 N4
1000	200	стерильный	20	5393-5532 N4



„ДиспоТубе“ (DispoTube)

Эргономичная ручка „ДиспоТубе“ (DispoTube) облегчает манипуляции и обеспечивает хороший захват даже при сложных условиях, например, при работе в перчатках. Одноразовые пробоотборники для отбора проб из жидкостей.

- ▶ Эргономичная ручка
- ▶ Возможен многоуровневый и точечный пробоотбор
- ▶ Ø 21 мм
- ▶ Диаметр отверстия 5,5 мм

Длина мм	Емкость мл	Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.
500	100	стандарт	20	5393-6620 N4
500	100	стерильный	20	5393-6621 N4
1000	200	стандарт	20	5393-6630 N4
1000	200	стерильный	20	5393-6631 N4



„ДиспоШёпфер“ (DispoSchöpfer)

«ДиспоШёпфер» (DispoSchöpfer) представляет собой черпак для проб, предназначенный специально для одноразового применения. Черпак с нанесённой на него рельефной шкалой обеспечивает замер и отображение объема с шагом в 10 мл и с предельным значением в 200 мл. Для удобства и простоты использования черпак имеет эргономичную ручку, а возможность применения как под правую, так и под левую руку обеспечивается двусторонним сливом.

- ▶ Черпак 200 мл
- ▶ внешний Ø 92 мм
- ▶ Эргономичная ручка

Длина мм	Исполнение	Штук в упаковке	№ арт.
500	стандарт	20	5393-6640 N4
500	стерилизовано	20	5393-6641 N4
1000	стандарт	20	5393-6650 N4
1000	стерилизовано	20	5393-6651 N4