


# LaboPlast® | SteriPlast® DispoSampler



- ▶ Für den Einweg-Bedarf
- ▶ Einzeln verpackt
- ▶ Produktion, Montage und Verpackung im Reinraum Klasse 7 (10.000)
- ▶ Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA- Richtlinien
- ▶ Optional gammastrahlen-sterilisiert
- ▶ HDPE

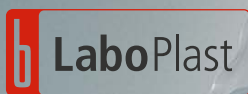

## DispoSampler – Einweg-Probenehmer | für höchste Ansprüche an die Probenahme

Die Bürkle Einweg-Probenehmer DispoSampler dienen zur Entnahme von Proben aus Flüssigkeiten, viskosen Medien, Pulvern und Granulaten. Es können Zielpunktproben, Allschicht- und Querschnittsproben sowie kleine und große Probenmengen entnommen werden. Einweg-Probenehmer müssen, im Gegensatz zu herkömmlichen Mehrweg-Probenehmern, nach Gebrauch nicht gereinigt werden.

- ▶ Die Reinigung von Mehrwegprobenehmern ist sehr anspruchsvoll und oft kompliziert, bei fettigen, stark haftenden oder giftigen Substanzen teilweise sogar unmöglich
- ▶ Arbeitsabläufe müssen nicht durch Reinigung unterbrochen werden
- ▶ Cross-Kontamination ist komplett ausgeschlossen
- ▶ Die Reinigungsmethode muss bei Audits nicht validiert werden
- ▶ Zeit und Kosten werden gespart

Bürkle DispoSampler LaboPlast® und SteriPlast®



### MultiDispo

Einweg-Zonensammler für die Probenahme aus mehreren Schichten des Probengutes. Geeignet für fließfähige Pulver und feinkörnige Granulate. Die repräsentative Allschichtprobe kann direkt durch den offenen Griff in ein Probengefäß entleert werden.

- ▶ Einfache Entleerung durch Öffnung im Griff (Ø 14 mm)
- ▶ Ø 25 mm / Ø Spitze 30 mm

Länge mm	Volumen ml	Ausführung	Stück pro Pack	Artikel-Nr.
500	100	standard	20	5393-4440 N4
500	100	sterilisiert	20	5393-4441 N4
1000	200	standard	20	5393-4450 N4
1000	200	sterilisiert	20	5393-4451 N4



### ZoneDispo

Mit dem Einweg-Allschichtsammler ZoneDispo wird in einem Probenzug eine repräsentative Allschichtprobe aus drei unterschiedlichen Schichten gesammelt. Geeignet für fließfähige Pulver und feinkörnige Granulate. Die gesammelte Probe kann im geschlossenen Probenehmer gesichert und transportiert werden.

- ▶ Ø 25 mm / Ø Spitze 30 mm

Länge mm	Volumen ml	Ausführung	Stück pro Pack	Artikel-Nr.
500	100	standard	20	5393-4420 N4
500	100	sterilisiert	20	5393-4421 N4
1000	200	standard	20	5393-4430 N4
1000	200	sterilisiert	20	5393-4431 N4



### TargetDispo

Mit TargetDispo wird eine Zielpunktprobe an einer vorher genau bestimmten Position des Probengutes entnommen. Der Sammler wird geschlossen in das Pulver oder Granulat eingestochen, und erst an der Entnahmestelle geöffnet und wieder geschlossen. Somit erhält man eine exakte Zielpunktprobe. Die Probe kann einfach über den offenen Griff entleert werden.

- ▶ Einfache Entleerung durch Öffnung im Griff (Ø 14 mm)
- ▶ Ø 25 mm / Ø Spitze 30 mm

Länge mm	Volumen ml	Ausführung	Stück pro Pack	Artikel-Nr.
500	100	standard	20	5393-4460 N4
500	100	sterilisiert	20	5393-4461 N4
1000	200	standard	20	5393-4470 N4
1000	200	sterilisiert	20	5393-4471 N4



### MicroDispo

Mit MicroDispo kann eine besonders kleine Probenahmemenge (10 ml) entnommen werden. Vor allem im Pharma-Bereich kommt es oft vor, dass nur eine geringe Menge zur Analyse gewonnen werden kann oder soll. Mit dem Einweg-Probenehmer können präzise Zielpunktproben von fließfähigen Pulvern und feinkörnigem Schüttgut genommen werden.

- ▶ Ergonomischer Handgriff
- ▶ Ø 21 mm

Länge mm	Volumen ml	Ausführung	Stück pro Pack	Artikel-Nr.
500	10	standard	20	5393-2240 N4
500	10	sterilisiert	20	5393-2241 N4
1000	10	standard	20	5393-2250 N4
1000	10	sterilisiert	20	5393-2251 N4




### PowderDispo

PowderDispo ist der ideale Einweg-Probenehmer für Querschnitts-proben von pulverigen oder leicht kohäsiven Substanzen. Mit der Lanze kann eine komplette Allschichtprobe aus Säcken oder kleineren Behältern entnommen werden.

- ▶ Ø 21 mm

Länge mm	Volumen ml	Ausführung	Stück pro Pack	Artikel-Nr.
300	60	standard	20	5393-5510 N4
300	60	sterilisiert	20	5393-5511 N4
500	100	standard	20	5393-5522 N4
500	100	sterilisiert	20	5393-5521 N4

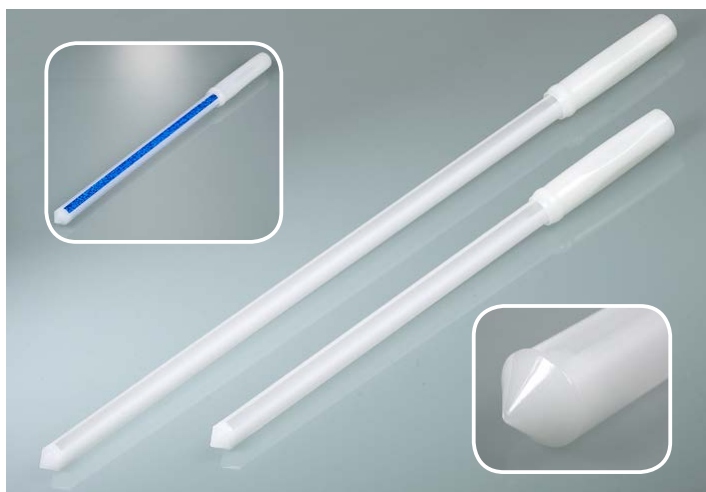

### DispoPicker

Einweg-Probenehmer für Pulver und feinkörniges Schüttgut. Durch die geschlossene Spitze kann das Probengut nicht wieder aus der Probenlanze herausrieseln. DispoPicker ist ideal für Querschnittsproben geeignet.

- ▶ Ø 21 mm

Länge mm	Volumen ml	Ausführung	Stück pro Pack	Artikel-Nr.
300	60	standard	20	5393-5540 N4
300	60	sterilisiert	20	5393-5541 N4
500	100	standard	20	5393-5550 N4
500	100	sterilisiert	20	5393-5551 N4



### DispoLance

Mit dem Einweg-Probenehmer DispoLance können schnell und unkompliziert kleine wie auch größere Probenmengen direkt aus Säcken entnommen werden. Der Sammler eignet sich für fließfähige Pulver und feinkörnige Granulate. Mit der stabilen Spitze wird der Probenehmer DispoLance in das Gebinde eingestochen, die Probe fließt über das offene Innenrohr direkt in den darunter gehaltenen Behälter oder Beutel.

- ▶ Probenmenge variabel
- ▶ Nennweite 14 mm
- ▶ Ø 21 mm

Länge mm	Ausführung	Stück pro Pack	Artikel-Nr.
300	standard	20	5393-5560 N4
300	sterilisiert	20	5393-5561 N4
500	standard	20	5393-5570 N4
500	sterilisiert	20	5393-5571 N4



### ViscoDispo

Mit dem Einweg-Probenehmer ViscoDispo können hochviskose Medien mit einer Viskosität von bis zu 100.000 mPas beprobt werden. Der ergonomisch geformte Griff und die sehr stabile Zugstange erleichtern das Ansaugen auch von zähflüssigen Substanzen.

- ▶ Ergonomischer Handgriff
- ▶ Dichtungslos
- ▶ Ø 21 mm
- ▶ Öffnungsdurchmesser 10 mm

Länge mm	Volumen ml	Ausführung	Stück pro Pack	Artikel-Nr.
500	100	standard	20	5393-3320 N4
500	100	sterilisiert	20	5393-3321 N4
1000	200	standard	20	5393-3330 N4
1000	200	sterilisiert	20	5393-3331 N4



YouTube



### LiquiDispo

Mit dem LiquiDispo Einweg-Probenehmer können Proben von sehr flüssigen bis leicht viskosen Flüssigkeiten genommen werden. Ein ergonomischer Handgriff erleichtert das Ziehen der Probe, indem wie mit einer Spritze bis zu 200 ml aufgesogen werden können.

- ▶ Ergonomischer Handgriff
- ▶ Dichtungslos
- ▶ Ø 21 mm
- ▶ Öffnungsdurchmesser 2,5 mm

Länge mm	Volumen ml	Ausführung	Stück pro Pack	Artikel-Nr.
500	100	standard	20	5393-1120 N4
500	100	sterilisiert	20	5393-1121 N4
1000	200	standard	20	5393-1130 N4
1000	200	sterilisiert	20	5393-1131 N4



### DispoPipette

Einfacher Einweg-Probenehmer zur Entnahme von dünnflüssigen Medien. Wenn die DispoPipette geöffnet in die Flüssigkeit eingeführt wird, erhält man eine Allschichtprobe, wird sie geschlossen bis zur Entnahmestelle geführt und dann erst geöffnet, erhält man eine Zielpunktprobe. Sehr einfache Bedienung. Mit zwei Öffnungsgrößen (2,5 / 5,5 mm) für unterschiedliche Viskositäten.

- ▶ Allschicht- und Zielpunktproben möglich
- ▶ Ø 21 mm

Länge mm	Volumen ml	Ausführung	Stück pro Pack	Artikel-Nr.
500	100	standard	20	5393-5500 N4
500	100	sterilisiert	20	5393-5501 N4
1000	200	standard	20	5393-5531 N4
1000	200	sterilisiert	20	5393-5532 N4



### DispoTube

Der ergonomische Handgriff des DispoTube erleichtert das Arbeiten und ermöglicht einen guten Griff auch unter schwierigen Voraussetzungen, z.B. mit Handschuhen. Einwegprobensammler zur Probenahme von Flüssigkeiten.

- ▶ Ergonomischer Handgriff
- ▶ Allschicht- und Zielpunktproben möglich
- ▶ Ø 21 mm
- ▶ Öffnungsdurchmesser 5,5 mm

Länge mm	Volumen ml	Ausführung	Stück pro Pack	Artikel-Nr.
500	100	standard	20	5393-6620 N4
500	100	sterilisiert	20	5393-6621 N4
1000	200	standard	20	5393-6630 N4
1000	200	sterilisiert	20	5393-6631 N4



### DispoSchöpfer

DispoSchöpfer ist ein Probenschöpfer speziell für den Einwegbedarf. Der skalierte Schöpfbecher mit erhabener Prägung ermöglicht ein Abmessen und eine Inhaltsanzeige in 10 ml-Schritten, bis zu 200 ml. Ein ergonomischer Handgriff sowie Rechts- und Links-Handbedienung durch beidseitigen Ausguss erleichtern und vereinfachen die Handhabung.

- ▶ Schöpfbecher 200 ml
- ▶ Außen-Ø 92 mm
- ▶ Ergonomischer Handgriff

Länge mm	Ausführung	Stück pro Pack	Artikel-Nr.
500	standard	20	5393-6640 N4
500	sterilisiert	20	5393-6641 N4
1000	standard	20	5393-6650 N4
1000	sterilisiert	20	5393-6651 N4