

# ХИТ ПРОДУКТЫ

## СТИКЕРЫ И ЭТИКЕТКИ



### Незаменимые помощники при отборе проб

После отбора проб из мешков или промышленных упаковок, образовавшиеся отверстия, через которые содержимое может высыпаться наружу, должны быть закрыты. Для этой цели отлично подходят стикеры «Клоз-Ит» (close-it), которые обеспечивают очень надёжное прилипание. Одновременно, стикер также может быть использован для маркировки контейнера. Не менее важным является четкая маркировка и пломбирование взятых проб. Только таким образом можно доказать, что сохраненный образец, вне всякого сомнения, соответствует оригиналу. Кроме того защитные стикеры выполняют функцию оригинальной пломбы и тем самым защищают от возможного манипулирования образца.

С разнообразными контрольными стикерами и этикетками компании Bürkle, гарантирован безопасный отбор проб от начала до конца.

### Контрольные стикеры «Клоз-Ит» (close-it)

Как правило, отбор проб из мешков, коробок, промышленных упаковок и т.п. осуществляют с помощью специальных пробоотборных трубок. Однако в результате в упаковке образуются отверстия, через которые содержимое может высыпаться наружу. Контрольные стикеры „Клоз-Ит“ (close-it) являются простым решением, позволяющим предотвратить это. Стикер «Клоз-Ит» (close-it) состоит из нескольких слоев (алюминий/бумага) и позволяет герметично заклеить контейнер. Наклеенный стикер является газонепроницаемым. Это защищает гигроскопичные порошки от попадания в них влаги, что может привести к образованию комков. Стикер предназначен не только для обеспечения герметичности. На нем можно отобразить информацию о процедуре контроля качества. Задняя поверхность стикера покрыта составом с сильной клеящей способностью. Это обеспечивает надежное прилипание практически ко всем используемым контейнерам. Стикер надежно крепится даже на поверхности, покрытые слоем мелкой пыли, к которым не прилипают обычные стикеры и клейкие ленты. Кроме того «Клоз-Ит» (close-it) хорошо приклеивается даже к влажным поверхностям.

- ▶ Стикеры выпускаются в удобных рулонах
- ▶ Стикеры легко отрываются от рулона по перфорации
- ▶ «Клоз-Ит» (close-it) – стандартный размер 95 x 95 мм
- ▶ «Клоз-Ит Макси» (close-it Maxi) – 150 x 150 мм, для заклеивания больших отверстий, либо длинных мест разрыва



#### Стикеры «Клоз-Ит» (close-it)

Ш x В мм	Цвет	Исполнение	Штук в рулоне	№ арт.	
95 x 95	Красный	есть	500	5303-0012	N4
95 x 95	Жёлтый	есть	500	5303-0014	N4
95 x 95	Синий	есть	500	5303-0015	N4
95 x 95	Зелёный	есть	500	5303-0016	N4
95 x 95	Чёрный	есть	500	5303-0011	N4
95 x 95	Белый	нет	500	5303-0002	N4
150 x 150	Красный	есть	250	5303-1012	N4
150 x 150	Жёлтый	есть	250	5303-1014	N4
150 x 150	Синий	есть	250	5303-1015	N4
150 x 150	Зелёный	есть	250	5303-1016	N4
150 x 150	Чёрный	есть	250	5303-1011	N4
150 x 150	Белый	нет	250	5303-1002	N4

## Стикеры «Клоз-Ит Фуд & Фарма» (close-it food & pharma)

В ответ на многочисленные запросы наших клиентов мы разработали специальные контрольные стикеры „Клоз-Ит Фуд & Фарма“ (close-it food & pharma), в которых используется клеящее вещество, рекомендованное для использования при работе с пищевыми продуктами. Этот стикер приклеивается так же прочно, как и обычный стикер „Клоз-Ит“ (close-it) от компании Bürkle, многократно проверенный в деле. Он обеспечивает надежное заклеивание отверстий, сделанных в процессе пробоотбора, для предотвращения высыпания материала.

Клеящий состав отвечает нормативам ЕС по работе с пищевыми продуктами. Так же как и обычный стикер «Клоз-Ит» (close-it), стикер «Клоз-Ит Фуд & Фарма» (close-it food & pharma) имеет изолирующий слой алюминиевой фольги. Это делает его пригодным для работы с продуктами питания, фармацевтическими препаратами, косметическими средствами и пищевыми добавками – то есть для работы со всеми веществами, загрязнение которых клеящими составами недопустимо.

- ▶ Соответствует нормативам FDA
- ▶ Особенно подходит для пищевой и фармацевтической промышленности



Стикеры «Клоз-Ит Фуд & Фарма» (close-it food & pharma)



Ш x В мм	Цвет	Исполнение	Штук в рулоне	№ арт.	
95 x 95	Красный	есть	500	5303-2017	N4
95 x 95	Жёлтый	есть	500	5303-2020	N4
95 x 95	Синий	есть	500	5303-2021	N4
95 x 95	Зелёный	есть	500	5303-2022	N4
95 x 95	Чёрный	есть	500	5303-2023	N4
95 x 95	Белый	нет	500	5303-2018	N4
150 x 150	Красный	есть	250	5303-3017	N4
150 x 150	Жёлтый	есть	250	5303-3020	N4
150 x 150	Синий	есть	250	5303-3021	N4
150 x 150	Зелёный	есть	250	5303-3022	N4
150 x 150	Чёрный	есть	250	5303-3023	N4
150 x 150	Белый	нет	250	5303-3018	N4

## Лента «Клоз-Ит Тейп» (close-it tape) | бесконечная клеящая способность

Наряду с отдельными отделяемыми стикерами «Клоз-Ит» (close-it) и «Клоз-Ит Фуд & Фарма» (close-it food & pharma) мы предлагаем многократно проверенные в деле контрольные стикеры на рулоне. При этом Вы можете сами решить, необходим вам небольшой кусок, например, для заклеивания небольшого отверстия или маркировки определенного участка. Или же Вы хотите быстро и просто заклеить большое отверстие, либо надежно восстановить длинное место разрыва. Благодаря чрезвычайной клеящей способности лента «Клоз-Ит Тейп» (close-it tape) держится на различных поверхностях, где не хватает клейкости обычной клейкой ленты.

Для универсального применения клейкая лента «Клоз-Ит» (close-it) tape изготовлена в белом цвете и снабжена вспомогательными линиями. Надписи не стираются, лента газонепроницаемая. Имеется классическая модель ленты «Клоз-Ит» (close-it), а также «Клоз-Ит Тейп / Фуд & Фарма» (close-it tape / food & pharma), в которых используется клеящее вещество с допуском для пищевых продуктов.

- ▶ Индивидуальное применение
- ▶ Различные модели
- ▶ Для заклеивания больших отверстий, либо длинных мест разрыва

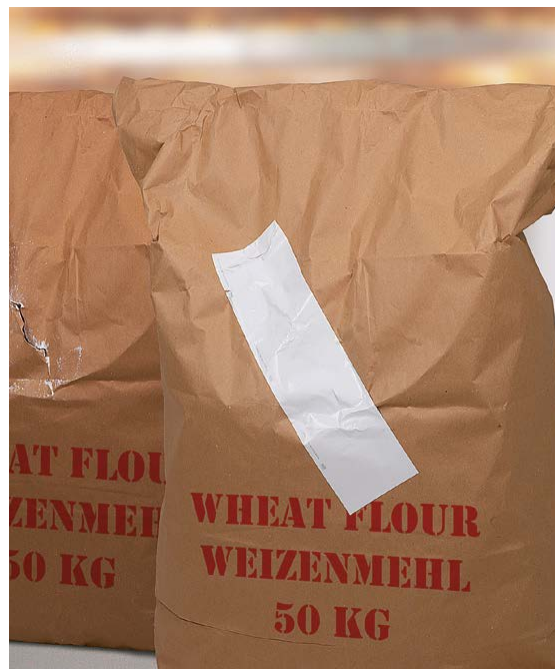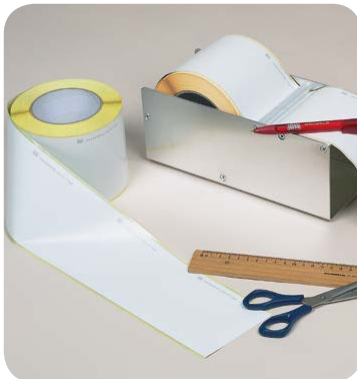

Лента «Клоз-Ит Тейп» (close-it tape)

Ширина мм	Исполнение	Длина м	№ арт.	
95	стандартное	50	5303-0017	N4
150	стандартное	50	5303-1017	N4
95	Фуд & Фарма	50	5303-2019	N4
150	Фуд & Фарма	50	5303-3019	N4


## „Клоз-Ит“ | с индивидуальным дизайном клиента

### Ваш индивидуальный стикер „Клоз-Ит“

Мы будем рады помочь и Вам при оформлении Вашего персонального стикера „Клоз-Ит“ (close-it). Вам требуется лишь чистовой рисунок Вашего эскиза? Или Вы предпочитаете воспользоваться всем комплексом наших графических услуг – от эскиза до печати? Наше рекламное подразделение с энтузиазмом решает самые нестандартные задачи: [info@buerkle.de](mailto:info@buerkle.de) | +49 (0) 76 35 8 27 95-0

### Изготовление с учетом пожеланий клиента


Стикеры „Клоз-Ит“ (close-it) прекрасно зарекомендовали себя на практике и в качестве контрольных стикеров, и для документирования, и в качестве информационных наклеек.

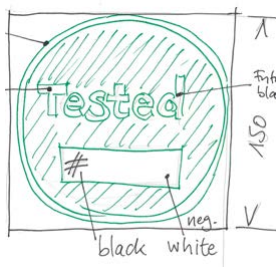

Ваша идея



Наше предложение

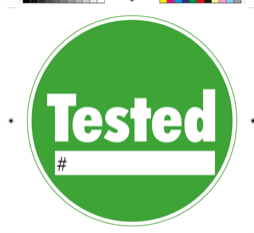

Конечный рисунок и печать



Готовый стикер „Клоз-Ит“ (close-it)



### Форма и цвет

Круглая, квадратная, прямоугольная или какая-либо иная форма? Мы можем реализовать любой, даже необычный контур! Мы с удовольствием сделаем Вам соответствующее предложение. Разумеется, печать возможна в любых цветовых решениях, причем как в одноцветном, так и в многоцветном исполнении.

### Оформление

Бумага-носитель для стикеров „Клоз-Ит“ (close-It) выпускается как с перфорацией, так и без нее. В одном рулоне может находиться различное количество стикеров. Мы с радостью ответим на Ваши уточняющие вопросы.

## Катушка для стикеров

Катушка для стикеров упрощает отрывание стикеров и обеспечивает их надежное хранение. Катушка также имеет специальную поверхность, на которой удобно писать.



- ▶ «Клоз-Ит» (close-it) имеют стандартный размер 95 x 95 мм. Close-It Maxi имеют размер 150 x 150 мм

### Катушка для стикеров

Исполнение	№ арт.	
Для стикеров 95 x 95 мм	5303-9000	N4
Для стикеров 150 x 150 мм	5303-9100	N4

## Защитная пломба «Сил-Ит» | для образцов для сравнения и оригинальной упаковки

Эта пломба может быть приклеена на все стандартные типы контейнеров. Она приклеивается настолько надежно, что ее невозможно удалить.

Если Вы запечатали контейнер пломбой «Сил-Ит» (seal-It), то контейнер невозможно открыть, не повредив пломбу. На пломбу нанесены пересекающиеся линии перфорации, по линиям которой пломба разорвется при малейшей попытке воздействия на нее.



- ▶ Четкая идентификация посредством сквозной нумерации
- ▶ Дополнительная контрольная бирка с тем же идентификационным номером на сопроводительные документы
- ▶ Длина пломбы – 178 мм, ширина – 30 мм
- ▶ Отрывная перфорация для каждой пломбы

### Защитная пломба «Сил-Ит»

Длина мм	Ширина мм	Штук в рулоне	№ арт.
178	30	500	5399-0003 N4

## Оригинальная пломба «Сейф-Ит» (safe-it)

Защитные стикеры «Сейф-Ит» (safe-it) представляют собой оригинальные пломбы и защиту от вскрытия проб, образцов для сравнения, при транспортировке, пломбировании ёмкостей с важными или опасными химическими веществами в лаборатории, а также для запечатывания писем, образцов товара и многого другого.

С помощью защитной пломбы ясно видно вскрытие упаковки, тем самым может быть доказано неправомерное вскрытие.

Если предпринимается попытка снятия защитного стикера, то он отделяется отдельными слоями. На поверхности необратимо появляется скрытый до этого рисунок, и стикер оставляет нестираемый след (так называемый void-стикер). После снятия стикера он не может быть использован повторно. Тем самым невозможно поменять стикер или совершить последующие изменения.



При снятии защитного стикера «Сейф-Ит» (safe-it) появляется серебряный рисунок в виде шахматного поля как на основании, так и на поверхности самого стикера.

- ▶ С рисунком в виде шахматного поля
- ▶ Очевидное доказательство вскрытия



Защитные стикеры «Сейф-Ит» (safe-it)

Ш x В мм	Штук в рулоне	№ арт.	
95 x 20	500	5303-5000	N4

## Пломба «СамплСейф» | Защищённая проба

Пломбы изготовлены из прочного полипропилена. Пломбы ясно идентифицируются девятизначными номерами. Струна пломбы имеет диаметр 2 мм, поэтому пломбы «СамплСейф» (SampleSafe) подходят также для совсем небольших петель и прорезей. Лента пломбы прочно крепится в запорной камере с помощью металлической вставки из нержавеющей пружинной стали. Односторонний механизм обеспечивает при этом дополнительную защиту от манипуляций. С помощью специальной ультразвуковой технологии нельзя силой открыть замок пломбы, не оставив при этом видимых следов.

- ▶ Четкая идентификация посредством сквозной нумерации
- ▶ 100 пломб (10 решеток) в упаковке
- ▶ Защищённые манипуляции благодаря защитным пружинам из нержавеющей стали



Пломба «СамплСейф» (SampleSafe)

Длина мм	Ø мм	Штук в упаковке	№ арт.	
260	2	100	5399-2902	N2

## Пломбируемые бутылки с широким горлышком

Прочная бутылка с ушками для пломбирования, расположенными на навинчивающейся крышке и бутылки. Прекрасно подходит для отправки образцов по почте. Пломбы обеспечивают повышенную надежность при идентификации образцов. Широкое горлышко, поэтому бутылку легко заполнять. Специально предназначена для вяз-

ких жидкостей, порошков, гранулированных материалов и паст.

- ▶ ПЭВП
- ▶ Герметичные
- ▶ Легко заполняются через широкое горлышко

Пломбируемые бутылки с широким горлышком

Объём мл	Ø контейнера мм	Внутр. ø горлышка мм	Высота с крышкой мм	№ арт.	
250	64	26,5	118	0322-0250	N3
500	78	40	147	0322-0500	N3
1000	100	50	186	0322-1000	N3
2000	120	50	230	0322-2000	N3

