

TOPSELLERS

PRECINTOS Y ETIQUETAS SELLADORAS



El Ayudante indispensable para la toma de muestras.

Después de haber tomado la muestra de sacos, big bags, etc. las aberturas han de volver a cerrarse. Para este fin, la fuerte adherencia de las etiquetas close-it es lo más adecuado. Del mismo modo, también pueden ser utilizadas para etiquetar los recipientes. Igual de importante es un buen etiquetado y sellado de las muestras recogidas. Sólo de esta forma se puede demostrar sin duda alguna que la muestra de referencia corresponde con la original. Las etiquetas de seguridad sirven igualmente como sello de control y protegen la muestra de una posible manipulación.

Con la gran variedad de etiquetas selladoras y precintos de Bürkle, la toma de muestras segura de principio a fin está garantizada.

Etiquetas de control close-it | imprescindible para la toma de muestras de material a granel

El muestreo de sacos, cartones, big-bags, etc. con muestreadores es una práctica habitual y probada. En ellos se hacen agujeros, y puede ocurrir que los materiales a granel se escurran del envase. Con la etiqueta de control close-it, esto se puede evitar sin complicaciones.

La etiqueta está fabricada en sistema sandwich (aluminio y papel) e impermeabiliza los envases frente al gas (barrera de vapor). Con ello se evita en gran parte el apelmazamiento del polvo higroscópico. La etiqueta no solo sirve para el cierre hermético. También se utiliza como sello de control para registros de calidad. close-it presenta una rotulación permanente con bolígrafo, lápiz o rotulador.

El reverso está provisto de un potente adhesivo. De este modo, close-it se adhiere a la mayoría de recipientes convencionales, también en superficies cubiertas de polvo fino, ligeramente humedecidas o incluso congeladas, donde fallan las etiquetas y cintas adhesivas convencionales.

- ▶ Las etiquetas se proporcionan en rollos manejables
- ▶ Cada etiqueta se puede separar del rollo por la perforación transversal
- ▶ close-it: tamaño estándar 95 x 95 mm
- ▶ close-it Maxi: 150 x 150 mm, para perforaciones mayores o grietas más largas en el recipiente



Etiquetas selladoras close-it

An x Al mm	Color	Modelo	Unidades por rollo	Nº de artículo	
95 x 95	rojo	impreso	500	5303-0012	N4
95 x 95	amarillo	impreso	500	5303-0014	N4
95 x 95	azul	impreso	500	5303-0015	N4
95 x 95	verde	impreso	500	5303-0016	N4
95 x 95	negro	impreso	500	5303-0011	N4
95 x 95	blanco	sin impresión	500	5303-0002	N4
150 x 150	rojo	impreso	250	5303-1012	N4
150 x 150	amarillo	impreso	250	5303-1014	N4
150 x 150	azul	impreso	250	5303-1015	N4
150 x 150	verde	impreso	250	5303-1016	N4
150 x 150	negro	impreso	250	5303-1011	N4
150 x 150	blanco	sin impresión	250	5303-1002	N4

Etiquetas selladoras close-it food & pharma

Cumpliendo el deseo de muchos de nuestros clientes, hemos desarrollado close-it food & pharma, una etiqueta de control con un adhesivo autorizado para alimentos. La fuerza de adherencia del adhesivo es casi igual a la del original, close-it de Bürkle, que ha probado su eficacia millones de veces. close-it food & pharma también evita en gran medida que se derrame el producto después de la toma de muestras.

El adhesivo cumple las directivas europeas sobre alimentos. Al igual que el original, close-it food & pharma dispone de una capa impermeable de lámina de aluminio. Así, close-it food & pharma resulta adecuado para el muestreo de alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos o suplementos alimenticios, también para congelados – en pocas palabras, en aquellas aplicaciones en las que se requiera una limpieza especial.

- ▶ Según las directrices de la FDA
- ▶ Especialmente apropiada para el campo de la alimentación y del farmacéutico



Etiquetas selladoras close-it food & pharma

An x Al mm	Color	Modelo	Unidades por rollo	Nº de artículo	
95 x 95	rojo	impreso	500	5303-2017	N4
95 x 95	amarillo	impreso	500	5303-2020	N4
95 x 95	azul	impreso	500	5303-2021	N4
95 x 95	verde	impreso	500	5303-2022	N4
95 x 95	negro	impreso	500	5303-2023	N4
95 x 95	blanco	sin impresión	500	5303-2018	N4
150 x 150	rojo	impreso	250	5303-3017	N4
150 x 150	amarillo	impreso	250	5303-3020	N4
150 x 150	azul	impreso	250	5303-3021	N4
150 x 150	verde	impreso	250	5303-3022	N4
150 x 150	negro	impreso	250	5303-3023	N4
150 x 150	blanco	sin impresión	250	5303-3018	N4



Cinta close-it | fuerza adhesiva en rollo sinfín

Además de las etiquetas de cierre despegables de forma individual close-it y close-it food & pharma, nuestras etiquetas de control acreditadas en múltiples aplicaciones se presentan ahora en forma de rollo continuo. De este modo, usted mismo podrá determinar si necesita solamente un pequeño trozo, p. ej. para cerrar un pequeño agujero o para marcar un punto determinado, o si desea reparar de forma fiable, rápida y sencilla una grieta larga o un agujero de gran tamaño.

Gracias a su extraordinario poder adhesivo, la cinta close-it se adhiere a las superficies más diversas en las que el efecto adhesivo de la cinta normal se pierde rápidamente.

Hemos mantenido el color blanco para la cinta adhesiva close-it con vistas a su uso universal y le hemos imprimido líneas auxiliares. Presenta una rotulación permanente y es impermeable al gas. Disponible en el acabado close-it clásico, así como en forma de cinta close-it food & pharma, con un adhesivo autorizado para alimentos.

- ▶ Ajuste individual
- ▶ Diferentes acabados
- ▶ Para perforaciones mayores o grietas más largas en el recipiente

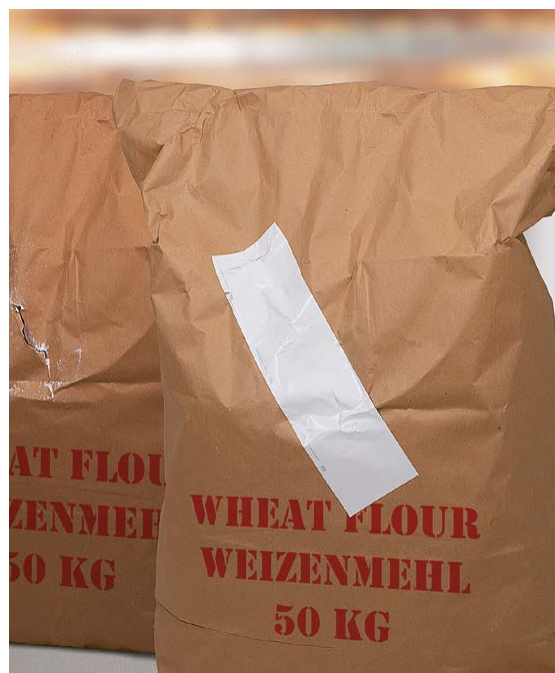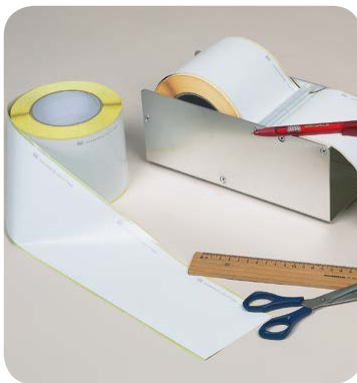

Cinta close-it

Anchura mm	Modelo	Longitud m	Nº de artículo	
95	Estándar	50	5303-0017	N4
150	Estándar	50	5303-1017	N4
95	food & pharma	50	5303-2019	N4
150	food & pharma	50	5303-3019	N4

close-it | con impresión especial personalizada para los clientes


Su close-it personalizada

Estaremos encantados de ayudarle a diseñar su propia close-it. ¿Necesita el diseño definitivo de su borrador? ¿O desea utilizar nuestro completo servicio gráfico, que cubre desde el borrador hasta la versión para imprenta? ¡Nuestro departamento de publicidad estará encantado de satisfacer todos sus requisitos:

info@buerkle.de | +49 (0) 76 35 8 27 95-0

A medida del cliente


En la práctica, la etiqueta adhesiva Close-it dispone de muchos usuarios satisfechos que la utilizan como sello de cierre, para fines de documentación o como etiqueta de aviso.

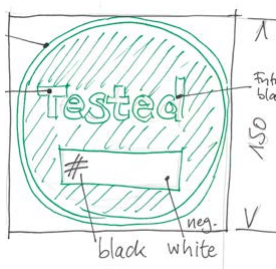

Su idea



Nuestra propuesta

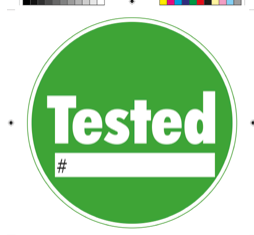

Diseño final e impresión



Etiqueta acabada



Forma y color

¿Redonda, cuadrada, rectangular o con otra forma? ¡También se pueden realizar contornos de lo más extraños! Estaremos encantados de hacerle una oferta. Naturalmente, la impresión está disponible en todos los colores, tanto monocolor como multicolor.

Presentación

Las close-it se pueden fabricar con o sin perforación en el papel portante. El número de etiquetas por rollo se puede modificar; estaremos encantados de informarle sobre las opciones disponibles.

Dispensador de etiquetas

El dispensador close-it permite una conservación segura y un desbobinado fácil de las etiquetas. En la plancha rotuladora se pueden rotular cómodamente las etiquetas.



- ▶ Para close-it de tamaño estándar (95 x 95 mm) o close-it Maxi (150 x 150 mm)

Dispensador de etiquetas

Modelo	Nº de artículo	
para etiquetas 95 x 95 mm	5303-9000	N4
para etiquetas 150 x 150 mm	5303-9100	N4

Precinto de seguridad seal-it

La etiqueta autoadhesiva seal-it se adhiere a todos los recipientes convencionales. Gracias a su increíble poder adhesivo no se puede volver a despegar.

Si se cierra una apertura de recipiente con etiqueta, éste no se podrá volver a abrir sin romper la etiqueta seal-it. seal-it está provista de varias perforaciones transversales adicionales que se desgarran de inmediato en caso de manipulación.



- ▶ Identificación inequívoca mediante números correlativos
- ▶ Etiqueta de control integrada con el mismo número para los documentos adjuntos
- ▶ Formato 178 mm de longitud x 30 mm de anchura
- ▶ Ruptura-perforación según etiqueta

Precinto de seguridad seal-it

Longitud mm	Anchura mm	Unidades por rollo	Nº de artículo
178	30	500	5399-0003 N4

Etiquetas selladoras safe-it

Las etiquetas de seguridad safe-it sirven como precinto y protección contra manipulaciones p. ej. de muestras y contramuestras, durante el transporte de muestras o el sellado de recipientes en el laboratorio con productos químicos importantes o peligrosos, así como para el precintado de cartas, envíos de mercancía y mucho más.

Con el sellado de garantía de originalidad, la primera apertura de un embalaje se realiza de forma clara e inequívocamente visible, lo que demostrará cualquier apertura no autorizada.

Si se despegla la etiqueta de seguridad, se separa en capas individuales. Aparece de forma irreversible en la superficie un dibujo que previamente estaba oculto y el pegamento deja un resto en la base que no se puede eliminar (la llamada etiqueta void). Una vez que se ha despegado la etiqueta ya no se puede volver a colocar. De este modo, no es posible cambiar etiquetas o realizar modificaciones posteriores.



Al despegar la etiqueta de seguridad safe-it aparece un ajedrezado plateado tanto en la base como en la superficie de la propia etiqueta adhesiva.

- ▶ Con ajedrezado
- ▶ Prueba visible de manipulación



Etiquetas de seguridad safe-it

An x Al mm	Unidades por rollo	Nº de artículo	
95 x 20	500	5303-5000	N4

Precinto SampleSafe

Los precintos están fabricados en polipropileno de gran estabilidad. Los precintos se identifican de forma inequívoca mediante el número correlativo de nueve cifras.

La cuerda del precinto tiene un diámetro de 2 mm, por lo que los precintos SampleSafe pasan sin problemas a través de arandelas, ojales y ranuras pequeños. La banda del precinto se asegura en la cámara de cierre a través de un inserto de metal fabricado en acero inoxidable para resortes. El mecanismo de tracción de un solo uso ofrece además una protección adicional contra la manipulación. Gracias al uso de un procedi-

miento ultrasónico especial no es posible manipular o abrir a la fuerza el cierre de los precintos sin dejar señales claramente perceptibles.

- ▶ Identificación inequívoca mediante números correlativos
- ▶ 100 precintos (10 juegos) por pack
- ▶ Protección contra manipulaciones gracias al muelle de seguridad fabricado en acero inoxidable



Precinto SampleSafe

Longitud mm	Diámetro mm	Unidades por pack	Nº de artículo	
260	2	100	5399-2902	N2

Botella de cuello ancho precintable

Botella estable con arandelas para precinto en el tapón de rosca y la botella. Especialmente adecuada para el envío de muestras. Mayor seguridad para las muestras gracias a los precintos. Abertura ancha que facilita el llenado. Especialmente para productos viscosos, polvos, granulados y pastas.

- ▶ HDPE
- ▶ Cierre hermético
- ▶ Fácil de llenar gracias a su abertura de cuello ancho

Botella de cuello ancho precintable

Capacidad ml	Diámetro de recipiente mm	Diámetro interior de cuello mm	Altura con cierre mm	Nº de artículo	
250	64	26,5	118	0322-0250	N3
500	78	40	147	0322-0500	N3
1000	100	50	186	0322-1000	N3
2000	120	50	230	0322-2000	N3

