

TOPSELLERS

VERSCHLUSS-SIEGEL UND ETIKETTEN



Unentbehrliche Helfer bei der Probenahme

Nach der Probenahme aus Säcken oder Big Bags müssen die Einstichstellen wieder verschlossen werden. Zu diesem Zweck eignen sich die besonders stark haftenden close-it Verschluss-Siegel. Gleichzeitig kann das Etikett auch zur Beschriftung der Gebinde genutzt werden. Ebenso wichtig ist die eindeutige Kennzeichnung und Verplombung der genommenen Proben. Nur so kann zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass eine Rückstellprobe mit dem Original übereinstimmt. Sicherheitsetiketten dienen zudem als Originalitätssiegel und schützen auf diese Weise vor einer möglichen Manipulation der Proben.

Mit den vielfältigen Verschluss-Siegeln und Etiketten von Bürkle ist eine sichere Probenahme von Anfang bis Ende garantiert.

close-it Kontroll-Verschluss-Siegel | unentbehrlich bei der Probenahme von Schüttgut

Die Beprobung aus Säcken, Kartons, Big-Bags etc. mit Probenehmerlanzen ist gängige und bewährte Praxis. Dabei entstehen Löcher, und es kann sein, dass selbstfließende Schüttgüter aus dem Gebinde herausrieseln. Mit dem close-it Verschluss-Siegel kann dies unkompliziert verhindert werden.

Das Etikett ist in Sandwich-Bauweise (Aluminium/Papier) hergestellt und verschließt die Gebinde gasdicht (Dampfsperre). Ein Verklumpen von hygroskopischen Pulvern wird damit weitgehend vermieden. Das Etikett dient nicht nur dem hermetischen Verschluss. Es wird auch als Kontroll-Siegel für Qualitätsaufzeichnungen genutzt. close-it ist wischfest beschriftbar mit Kugelschreiber, Bleistift oder Filzschreiber.

Die Rückseite ist mit einem bärenstarken Klebstoff versehen. Somit haftet close-it auf den meisten handelsüblichen Gebinden, auch auf mit Feinpulver bestäubten, leicht feuchten, oder sogar gefrorenen Oberflächen, wo die üblichen Etiketten oder Klebestreifen stets versagen.

- ▶ Etiketten werden auf handlichen Rollen geliefert
- ▶ Jedes Etikett kann einzeln an der Querperforation von der Rolle abgetrennt werden
- ▶ close-it – Standardgröße 95 x 95 mm
- ▶ close-it Maxi - 150 x 150 mm, für größere Löcher oder auch längere Risse in Gebinden



Verschluss-Siegel close-it

B x H mm	Farbe	Ausführung	Stück pro Rolle	Artikel-Nr.	
95 x 95	rot	bedruckt	500	5303-0012	N4
95 x 95	gelb	bedruckt	500	5303-0014	N4
95 x 95	blau	bedruckt	500	5303-0015	N4
95 x 95	grün	bedruckt	500	5303-0016	N4
95 x 95	schwarz	bedruckt	500	5303-0011	N4
95 x 95	weiß	unbedruckt	500	5303-0002	N4
150 x 150	rot	bedruckt	250	5303-1012	N4
150 x 150	gelb	bedruckt	250	5303-1014	N4
150 x 150	blau	bedruckt	250	5303-1015	N4
150 x 150	grün	bedruckt	250	5303-1016	N4
150 x 150	schwarz	bedruckt	250	5303-1011	N4
150 x 150	weiß	unbedruckt	250	5303-1002	N4

Verschluss-Siegel close-it food & pharma

Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden haben wir close-it food & pharma, ein Verschluss-Siegel mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff, entwickelt. Die Haftkraft des Klebers ist nahezu wie beim Original, dem millionenfach bewährten close-it von Bürkle. Auch close-it food & pharma verhindert nachhaltig das Ausrieseln von Schüttgut nach der Probenahme.

Der Klebstoff entspricht den europäischen Lebensmittelrichtlinien. close-it food & pharma hat wie das Original eine Sperrschicht aus Aluminiumfolie. Somit eignet sich close-it food & pharma für die Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln, selbst für Gefriergut – kurz, überall in den Anwendungen, in denen es auf besondere Reinheit ankommt.

- ▶ Gemäß FDA-Richtlinie
- ▶ Speziell für den Pharma- und Lebensmittelbereich geeignet



Verschluss-Siegel close-it food & pharma


B x H mm	Farbe	Ausführung	Stück pro Rolle	Artikel-Nr.	
95 x 95	rot	bedruckt	500	5303-2017	N4
95 x 95	gelb	bedruckt	500	5303-2020	N4
95 x 95	blau	bedruckt	500	5303-2021	N4
95 x 95	grün	bedruckt	500	5303-2022	N4
95 x 95	schwarz	bedruckt	500	5303-2023	N4
95 x 95	weiß	unbedruckt	500	5303-2018	N4
150 x 150	rot	bedruckt	250	5303-3017	N4
150 x 150	gelb	bedruckt	250	5303-3020	N4
150 x 150	blau	bedruckt	250	5303-3021	N4
150 x 150	grün	bedruckt	250	5303-3022	N4
150 x 150	schwarz	bedruckt	250	5303-3023	N4
150 x 150	weiß	unbedruckt	250	5303-3018	N4

close-it^{tape} | endlose Klebkraft

Neben den einzeln ablösbaren Verschlussetiketten close-it und close-it food & pharma gibt es unser vielfach bewährtes Kontroll-Siegel nun auch auf einer Endlosrolle. Somit können Sie selbst bestimmen, ob Sie nur ein kleines Stück, z.B. zum Verschließen eines kleinen Loches oder zum Markieren einer bestimmten Stelle benötigen. Oder ob Sie schnell und einfach einen langen Riss oder ein großes Loch zuverlässig reparieren wollen. Mit seiner extrem starken Klebkraft hält close-it^{tape} auf verschiedensten Untergründen, wo die Klebewirkung von normalem Klebeband schnell an seine Grenzen gelangt.

Für den universellen Einsatz ist das Klebeband close-it^{tape} in Weiß gehalten und mit Hilfslinien bedruckt. Es ist wischfest beschriftbar und verschließt gasdicht. Erhältlich in der klassischen close-it Ausführung sowie als close-it^{tape} food & pharma, mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff.

- ▶ Individuell anpassbar
- ▶ Verschiedene Ausführungen
- ▶ Für größere Löcher oder auch längere Risse in Gebinden

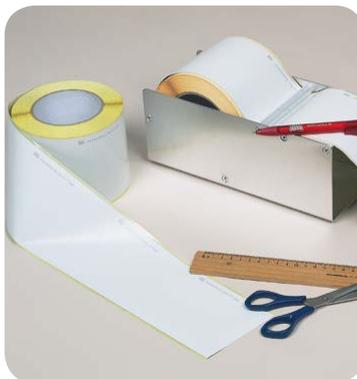

close-it^{tape}

Breite mm	Ausführung	Länge m	Artikel-Nr.	
95	standard	50	5303-0017	N4
150	standard	50	5303-1017	N4
95	food & pharma	50	5303-2019	N4
150	food & pharma	50	5303-3019	N4


close-it | mit individuellem Kunden-Sonderdruck

Ihr individuelles close-it

Gerne helfen wir auch Ihnen bei der Gestaltung Ihres eigenen close-it. Benötigen Sie eine Reinzeichnung Ihres Entwurfs? Oder möchten Sie unseren kompletten Grafik-Service vom Entwurf bis zur Druckabwicklung nutzen? Unsere Werbeabteilung freut sich über jede Herausforderung: info@buerkle.de | +49 (0) 76 35 8 27 95-0

Maßgeschneidert nach Kundenwunsch

Das close-it Haftetikett hat in der Praxis viele zufriedene Anwender, die close-it als Kontroll-Verschluss-Siegel, zur Dokumentation oder auch als Hinweis-Etikett verwenden.

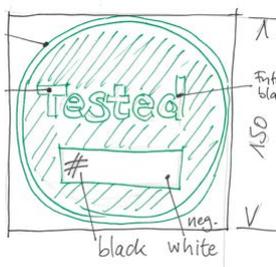

Ihre Idee



Unser Vorschlag



Reinzeichnung und Druck



Fertiges close-it



Form und Farbe

Rund, quadratisch, rechteckig, sonstige Form? Auch ausgefallene Konturen lassen sich realisieren! Wir machen Ihnen hierfür gerne ein Angebot. Natürlich ist auch der Druck in allen Farben möglich, sowohl ein- als auch mehrfarbig.

Aufmachung

close-it kann mit oder ohne Perforation auf dem Trägerpapier gefertigt werden. Die Anzahl der Etiketten pro Rolle ist flexibel – wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten.

Etiketten-Abroller

Der close-it Abroller sorgt für geschütztes Aufbewahren und einfaches Abrollen der Etiketten. Auf der Beschriftungsplatte können die Etiketten bequem beschriftet werden.



- Für close-it Standardgröße 95 x 95 mm oder close-it Maxi 150 x 150 mm

Etiketten-Abroller

Ausführung	Artikel-Nr.	
für Etiketten 95 x 95 mm	5303-9000	N4
für Etiketten 150 x 150 mm	5303-9100	N4

Sicherheitsplombe seal-it | für Rückstellproben

Das seal-it Selbstklebeetikett haftet auf allen herkömmlichen Gebinden. Dank seiner unglaublichen Klebekraft ist es nicht wieder ablösbar. Wird eine Gebindeöffnung mit dem Etikett verschlossen, kann das Gebinde nicht geöffnet werden, ohne dass dabei das seal-it Etikett zerstört wird. seal-it ist zusätzlich mit mehreren Querperforationen versehen, die bei Manipulation sofort zerreißen wie eine Auto-Vignette.



- Eindeutige Identifizierung über fortlaufende Nummer
- Integriertes Kontrolletikett mit gleicher Nummer für Begleitpapiere
- Format 178 mm lang, 30 mm breit
- Abreiß-Perforation nach jedem Etikett

Sicherheitsplombe seal-it

Länge mm	Breite mm	Stück pro Rolle	Artikel-Nr.	
178	30	500	5399-0003	N4

Originalitätssiegel safe-it

Das Sicherheitsetikett safe-it dient als Originalitätssiegel und Manipulationsschutz z.B. von Proben, Rückstellproben, beim Probentransport, Versiegeln von Behältern im Labor mit wichtigen oder gefährlichen Chemikalien sowie zur Verplombung von Briefen, Warensendungen und vielem mehr.

Mit dem originalitätssichernden Siegel wird die Erstöffnung einer Verpackung deutlich und unwiderruflich sichtbar gemacht, ein unrechtmäßiges Öffnen kann somit nachgewiesen werden.

Wird das Sicherheitsetikett wieder abgelöst, trennt es sich in einzelne Schichten. Es erscheint irreversibel ein zuvor verborgenes Muster auf der Oberfläche und der Kleber hinterlässt einen nicht entfernbaren Rest auf dem Untergrund (sogenanntes Void-Etikett). Nachdem das Etikett einmal abgelöst wurde kann es nicht wieder eingesetzt werden. Ein Umeticketieren oder nachträgliche Veränderungen sind somit nicht möglich.



Bei dem Ablösen des Sicherheitssiegels safe-it erscheint ein silbernes Schachbrettmuster, sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Oberfläche des Aufklebers selbst.

- ▶ Mit Schachbrettmuster
- ▶ Sichtbarer Manipulationsnachweis



Sicherheitsetiketten safe-it

B x H mm	Stück pro Rolle	Artikel-Nr.	
95 x 20	500	5303-5000	N4

Sample-Safe Plombe | Proben sichern

Die Plomben sind aus stabilem Polypropylen gefertigt. Durch die fortlaufende 9-stellige Nummer sind die Plomben eindeutig identifizierbar. Die Plombensaite hat einen Durchmesser von 2 mm, deshalb passen SampleSafe-Plomben auch durch kleine Ösen und Schlitzte. Das Plombenband wird in der Verschlusskammer durch einen Metall-Einsatz aus rostfreiem Federstahl fest gesichert. Der Einweg-Zugmechanismus bietet dabei zusätzlichen Schutz vor Manipulation. Durch den Einsatz eines speziellen Ultraschallverfahrens ist es nicht möglich den Verschluss der

Plombe gewaltsam zu öffnen oder zu manipulieren ohne eindeutige Spuren zu hinterlassen.

- ▶ Eindeutige Identifizierung über fortlaufende Nummer
- ▶ 100 Plomben (10 Gitter) pro Pack
- ▶ Manipulationsschutz durch Sicherheitsfeder aus rostfreiem Stahl



SampleSafe Plombe

Länge mm	Ø mm	Stück pro Pack	Artikel-Nr.	
260	2	100	5399-2902	N2

Plombierbare Weithalsflasche

Stabile Flasche mit Plombierösen an Schraubverschluss und Flasche. Besonders geeignet für den Probenversand. Erhöhte Probensicherheit durch Plomben. Weite Öffnung, daher leicht zu befüllen. Speziell für dickflüssige Medien, Pulver, Granulate und Pasten.

- ▶ HDPE
- ▶ Flüssigkeitsdicht
- ▶ Leicht befüllbar durch weite Halsöffnung

Plombierbare Weithalsflasche

Inhalt ml	Behälter-Ø mm	Hals-Ø innen mm	Höhe mit Verschluss mm	Artikel-Nr.	
250	64	26,5	118	0322-0250	N3
500	78	40	147	0322-0500	N3
1000	100	50	186	0322-1000	N3
2000	120	50	230	0322-2000	N3

